

取扱説明書

松葉杖（腋窩支持クラッチ）

S11



● 目 次 ●

安全に関するご注意	1
内容物の確認	2
1. 各部の名称	2
2. 松葉杖の長さ、グリップ高さの目安	3
3. 松葉杖の長さ、グリップ高さ調節	4
4. 松葉杖の主な使い方	5
5. 仕様	5
6. 使用上のご注意	6
7. 杖の点検・保守	6
8. 保証	7

このたびはカワムラサイクルの松葉杖をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が
記載されています。

取扱説明書は適宜更新しております。最新版を弊社ホームページからダウンロードして
いただけます（<http://www.kawamura-cycle.co.jp/product/manual.htm>）。

※ご使用になる前に必ずお読みください。また、ご利用いただく際には必ず携帯していただ
くか、必要なときにいつでもご覧になれるところへ大切に保管してください。

安全に関するご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


[表示マークの説明]

※正しい取り扱いに関する必要事項を標示(シンボルマーク)で表しています。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
 禁止	してはいけないことを示しています。
 必ず守る	必ずしなければならないことを示しています。

 警告	 禁止	●勝手に改造・分解しないでください。 強度や耐久性が劣化して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。 ●本製品を火気に近づけないで下さい。 熱くなりプラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。 ●この製品は、歩行訓練用の杖です。それ以外の用途には使用しないでください。
	 必ず守る	●認知症（痴呆症）の方の場合は、部品等を飲み込むことが考えられますので、十分に注意して下さい。 ●滑りやすい床面や濡れている床面では動く場合がありますので、充分ご注意ください
 注意	 禁止	●杖を投げたり落したり、衝撃を加えないでください。 ●湿気の多いところや雨風の当たるところに本製品を放置しないでください。サビの原因になります。
	 必ず守る	●高さ調整ピンは、確実に固定されているか必ず確認してください。 ●次のような場所・状況でのご使用は危険です。使用を避けるか、介助者に同行してもらってください。 ・凹凸の激しい道 ・夜間、雨や雪、風の強い日 ・凍結路 ・深い砂利道や砂道 ●屋外に放置すると、サビなどにより製品が劣化します。保管は屋内でおこなってください。

1. 各部の名称

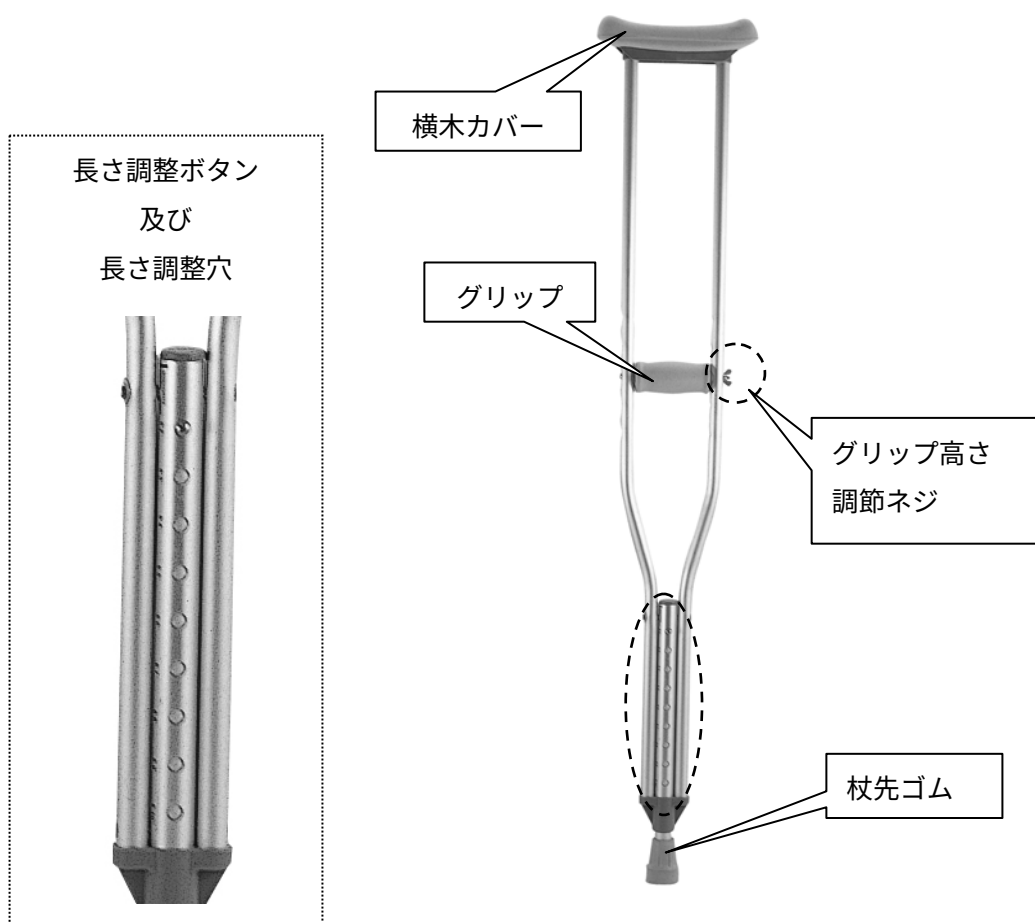

2. 松葉杖の長さ、グリップ高さの目安

＜松葉杖の長さ＞

腋の下より指3、4本程度あけた位置に横木カバーの上面が来るくらいの高さが目安です。

＜グリップ高さ＞

右図のように、足先より15cm程外側に杖先を置いて肘を軽く曲げた状態（約30度）でグリップが握れるくらいが目安です。



3. 松葉杖の長さ、グリップ高さ調節


《長さの調節》




「長さ調節ボタン」を押して、長さを調節します。





《グリップ高さの調節》

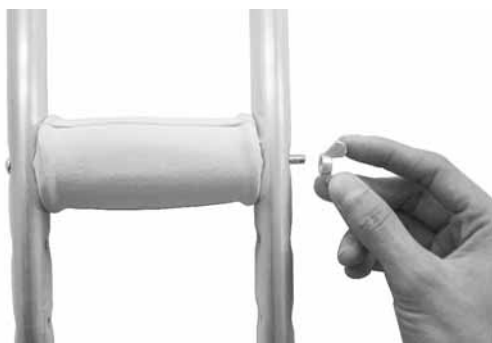

①グリップ横の「グリップ高さ調節ネジ」を緩めて取り外します。

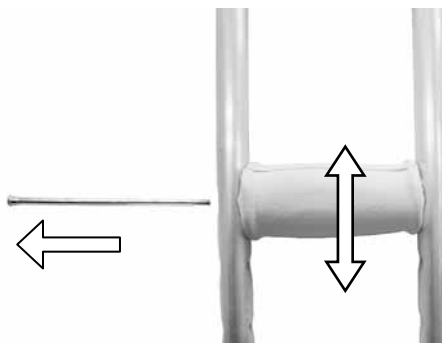

②ボルトを引き抜いてグリップを上下に移動し、穴位置を合わせます。

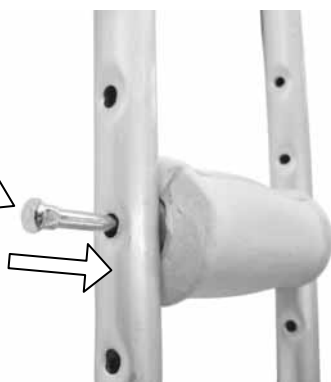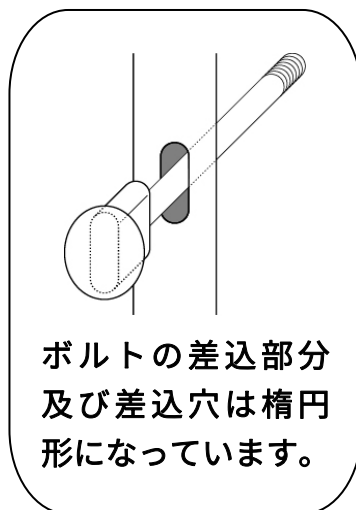

③ボルトを穴の形状にあわせて戻し、ネジをしっかりと締めます。


4. 松葉杖の主な使い方

《平地歩行》

歩行においては、横木に身体を乗せることはしないようにし、腋で締めつけるようにします。それは、腋窩部は多くの血管や神経があり、そこを長時間圧迫することを避けるためです。


3点歩行、2点歩行、4点歩行、大振り歩行、小振り歩行がある。一側の下肢に問題がある場合には3点歩行がもっとも多く用いられます。

3点歩行

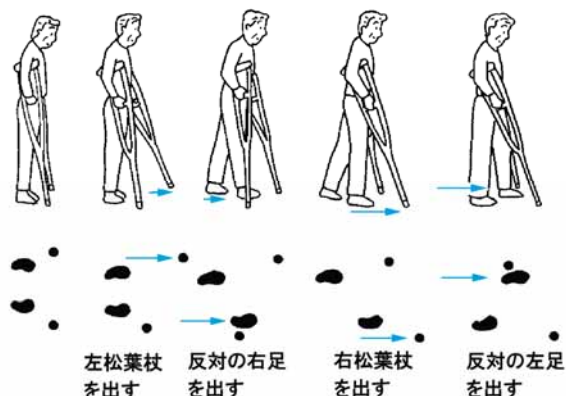

《階段の上り下り》

階段の上りでは杖から健側下肢、患側下肢の順番で行います。また、下りる場合には杖、患側、健側の順番で行います。

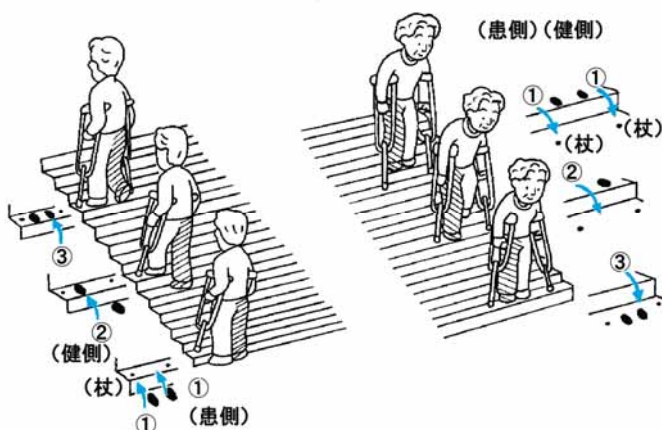

5. 仕様

S11		
材質	本体	アルミ、鉄
	グリップ	天然ゴム製
	先ゴム	合成ゴム製
重量		870g
長さ		110.5～130.5cm 2.5cm ピッチ (9段階)
横木カバー～ グリップ間隔		32.5～48.5 cm 3.7cm ピッチ (5段階)
色		茶／シルバー


6. 使用上のご注意



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

- 本製品は、必ず医師や専門家または販売店の指導に基づいてご使用ください。
- 身体に合った杖を選んでください。
- ご使用前には各部の点検をしてください。また、杖先ゴムが破れたり磨耗したりなどの異常があるときは、交換してください。
- 身体に合った適切な長さに調節してください。
- 支柱が確実に固定されたことを確認してご使用ください。
- 濡れた床等、滑りやすい路面での使用は避けてください。
- ぬかるみや、泥地などではバランスを崩す恐れがありますので、ご使用はお避けください。
- 人に向けて振り回したりしないでください。
- 段差のあるところでのご使用はお避けください。
- 階段の上り下りの際は、左右の杖が同じ段に乗るよう、充分にご注意ください。左右の杖が接地しないと、転倒の恐れがあります。

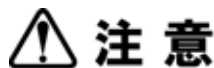

注意

取り扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。

- 本製品は歩行訓練用です。用途以外（例えば、登山用、護身用などに）には使用しないでください。
- 杖先が溝などにはまらないようご注意ください。
- 杖を分解・改造しないでください。（保証対象外）

<保管方法>

- 高温・多湿のところは避け、なるべく日が当たらないところに保管してください。
- 杖の上に重いものを置かないでください。

7. 杖の保守、点検

この製品を安全にお使いいただくためには、日ごろのお手入れと点検整備が必要です。

★汚れていませんか？

ホコリや泥などで汚れたときはそのままにしておかず、早めに乾いた雑巾等でふき取ってください。汚れのひどいときは中性洗剤をお使いください。

★消耗部品の交換は必要ですか？

先ゴムの磨耗がないか確認し、磨耗が激しい場合には交換してください。

異常が見つかったらご使用を中止してください。

8. 保証

弊社の定める保証とは、正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、無償にて修理を行うことをお約束するものです。

★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。

返送用登録はがきに所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送いただきご登録ください。

※ご登録がない場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

★保証期間

お買い上げ日より 1 年間（消耗部品は含みません。）

★保証期間後

保証期間後はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

★消耗部品

・ 杖先ゴム ・ 横木カバー ・ グリップ

★保証の適用除外となる場合

- (a) ご使用による消耗および取扱不注意による破損
- (b) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
- (c) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- (d) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
- (e) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
- (f) 特殊な状態での使用による破損
- (g) 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
- (h) 取扱説明書に従わずに使用して生じた故障および破損
- (i) 取扱説明書に禁じられてる使用方法によって生じた故障
- (j) ご購入後 1 ヶ月以内に返送用登録はがきをご返送いただいていない場合
- (k) 日本国外でご使用の場合

★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5 年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

★修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

★本製品を他人に譲る場合

この製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡してください。

★一度使用したものは、原則として製品のお取り替えはできません。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。



株式会社 **カワムラサイクル**



■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2800
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2820
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1-8-3	TEL03-3874-3511
■横浜サービスセンター	〒220-0073	横浜市西区岡野 2-12-9	TEL045-290-9585
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町 1-3-11	TEL0568-52-4800
■大阪サービスセンター	〒564-0044	大阪府吹田市南金田 2-20-10	TEL06-6190-8488
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡市西区生の松原 1-18-3	TEL092-882-4722
■神戸工場 ■神戸第二工場 ■いなみの工場 ■メンテナンスセンター			

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。